



RESISTENTI
AGLI IMPATTI



ROBUSTI



LAVABILI



ANTIBATTERICI



RESISTENTI RAGGI UV


CRM 001 3C3R
CARRELLO AMAGNETICO 3 CASSETTI 3 RIPIANI



ENCLARA
MEDICAL

Il nostro carrello amagnetico CRM 001 3C3R è progettato per il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni, strumenti e materiali vari in tutte le zone dei siti RM. È realizzato impiegando esclusivamente materiali non metallici, non magnetici ed elettricamente non conduttivi.

Per questo motivo in base alla norma armonizzata CEI EN 62570:2016-01 può essere etichettato come MR Safe, il più alto standard di compatibilità con ambienti RM.

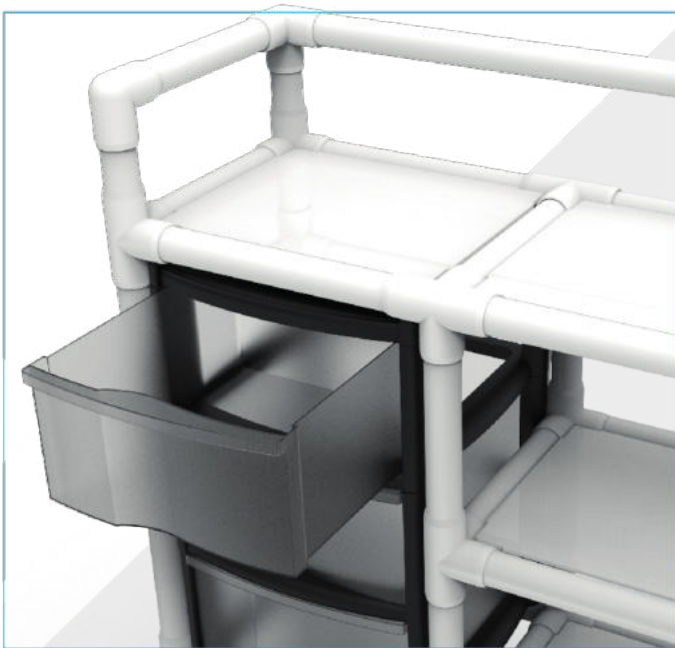

RUOTE

Il carrello è dotato di 4 ruote piroettanti di grande diametro in materiale sintetico. Le ruote posteriori dispongono di freno.

ACCESSORI

Sul carrello può essere montato un accessorio porta farmaci con 5 contenitori a ribalta.



Particolare dell'accessorio porta farmaci.



Particolare della ruota piroettante con freno.

CRM 001 3C3R

TELAIO

Il telaio è interamente realizzato in PVC, addizionato con biossido di titanio. Questo oltre a migliorarne l'aspetto estetico (bianco lucido, resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo), incrementa la resistenza meccanica ed ha proprietà antibatteriche specifiche. Le sue parti sono accoppiate mediante un processo di saldatura chimica, per cui la struttura si comporta come un unico pezzo, solido, rigido e resistente.

CASSETTIERA


Il telaio è interamente realizzato in PVC, addizionato con biossido di titanio. Questo oltre a migliorarne l'aspetto estetico (bianco lucido, resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo), incrementa la resistenza meccanica ed ha proprietà antibatteriche specifiche. Le sue parti sono accoppiate mediante un processo di

CASSETTIERA

Le cassetteria, interamente in plastica, è dotata di 3 cassetti trasparenti da 20 litri con apertura ergonomica e fermo per evitare l'estrazione totale accidentale. Ciascun cassetto ha una portata di 20 kg. I cassetti possono essere dotati di predisposizione per sigilli di sicurezza.

RIPIANI

I ripiani sono realizzati in Hpl radiotrasparente e sono estraibili per una facile sanificazione. Ciascun ripiano sopporta un carico fino a 25 kg.

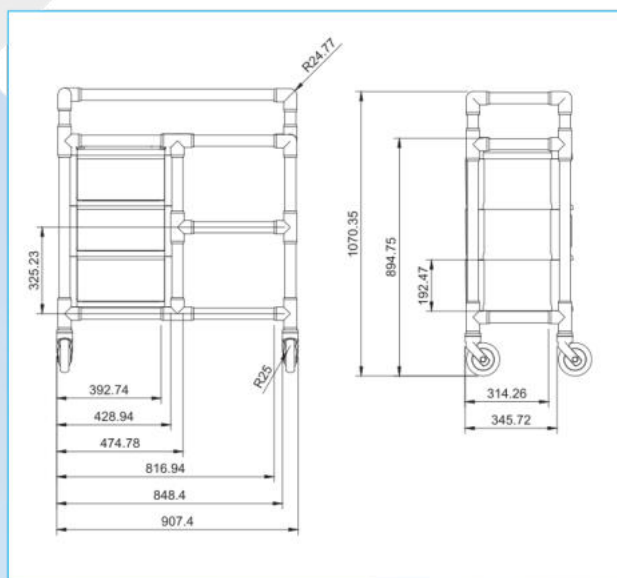

Carrello CRM 001 3C3R, vista frontale e laterale

ENCLARA MEDICAL S.r.l.

Via Liberazione, 71 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy - P.iva: 10373980969
T. +39 02 94750334 - M. info@enclaramedical.it - www.enclaramedical.it