



RESISTENTI
AGLI IMPATTI



ROBUSTI



LAVABILI



ANTIBATTERICI



RESISTENTI RAGGI UV


CRM 001 4C
CARRELLO AMAGNETICO 4 CASSETTI



ENCLARA
MEDICAL

Il nostro carrello amagnetico CRM 001 4C è progettato per il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni, strumenti e materiali vari in tutte le zone dei siti RM. È realizzato impiegando esclusivamente materiali non metallici, non magnetici ed elettricamente non conduttivi.

Per questo motivo in base alla norma armonizzata CEI EN 62570:2016-01 può essere etichettato come MR Safe, il più alto standard di compatibilità con ambienti RM.

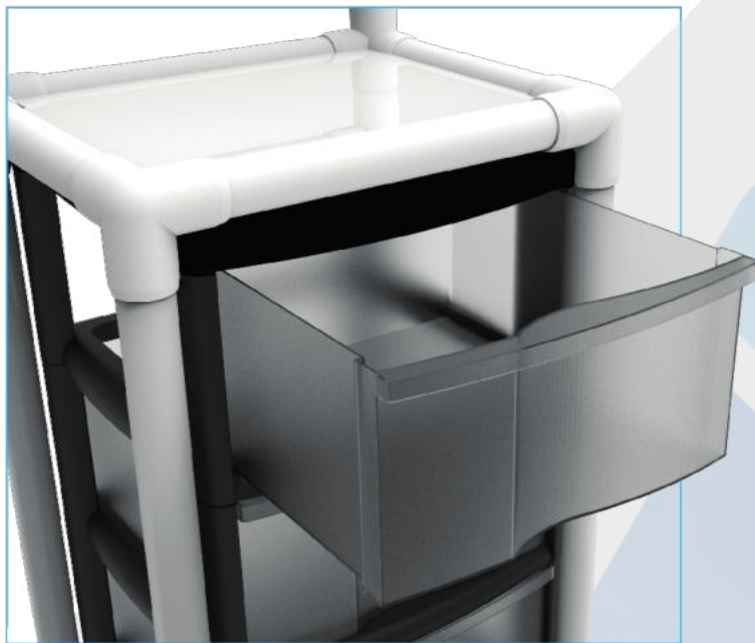

NOTA

Su richiesta i carrelli sono disponibili anche in versione MR Conditional per stazioni RM fino a 3 Tesla, con ruote in materiale plastico e particolari in ottone.



Particolare della maniglia di appoggio.



Particolare della ruota piroettante con freno.

CRM 001 4C

TELAIO

Il telaio è interamente realizzato in PVC, addizionato con biossido di titanio. Questo oltre a migliorarne l'aspetto estetico (bianco lucido, resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo), incrementa la resistenza meccanica ed ha proprietà antibatteriche specifiche. Le sue parti sono accoppiate mediante un processo di saldatura chimica, per cui la struttura si comporta come un unico pezzo, solido, rigido e resistente.

CASSETTIERA


La cassetteria, interamente in plastica, è dotata di 4 cassetti trasparenti da 20 litri con apertura ergonomica e fermo per evitare l'estrazione totale accidentale. Ciascun cassetto ha una portata di 20 kg. I cassetti possono essere dotati di predisposizione per sigilli di sicurezza.

RIPIANO

Il ripiano superiore è realizzato in Hpl radiotrasparente ed è estraibile per una facile sanificazione. Il ripiano sopporta un carico fino a 25 kg.

RUOTE

I carrelli sono dotati di 4 ruote piroettanti di grande diametro in materiale sintetico. Le ruote posteriori dispongono di freno.

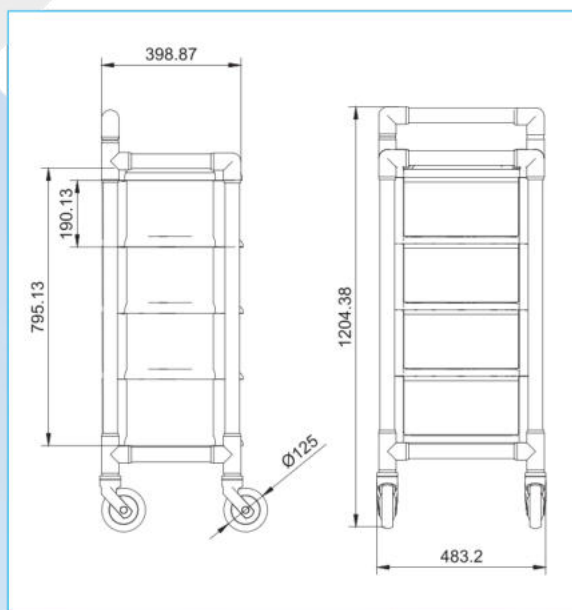

Carrello CRM 001 4C, vista frontale e laterale

ENCLARA MEDICAL S.r.l.

Via Liberazione, 71 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy - P.iva: 10373980969
T. +39 02 94750334 - M. info@enclaramedical.it - www.enclaramedical.it