



RESISTENTI
AGLI IMPATTI



ROBUSTI



LAVABILI



ANTIBATTERICI



RESISTENTI RAGGI UV

CRM 001 S

CARRELLO SERVITORE AMAGNETICO



ENCLARA
MEDICAL

Il nostro carrello amagnetico CRM 001 S è progettato per fornire un appoggio al braccio del paziente durante l'infusione. È realizzato interamente con materiali non metallici, non magnetici ed elettricamente non conduttivi. Per questo motivo in base alla norma armonizzata **CEI EN 62570:2016-01** può essere etichettato come **MR Safe**, il più alto standard di compatibilità con ambienti RM.

CRM 001 S

TELAIO


Il telaio è interamente realizzato in PVC, addizionato con biossido di titanio. Questo oltre a migliorarne l'aspetto estetico (bianco lucido, resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo), incrementa la resistenza meccanica ed ha proprietà antibatteriche specifiche. Le sue parti sono accoppiate mediante un processo di saldatura chimica, per cui la struttura si comporta come un unico pezzo, solido, rigido e resistente.

PIANO DI APPOGGIO

Il piano di appoggio è realizzato in Hpl radiotrasparente e sopporta un carico fino a 25 kg.

RUOTE

Il carrello è dotato di 4 ruote piroettanti di grande diametro in materiale sintetico. Le ruote posteriori dispongono di freno.

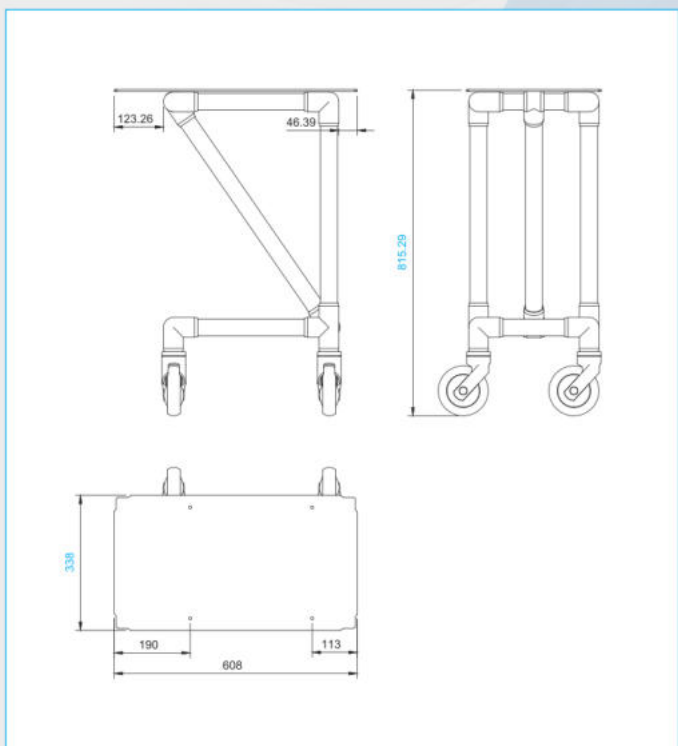

Particolare della ruota piroettante con freno.

Carrello CRM 001 S, vista frontale, laterale e superiore

ENCLARA MEDICAL S.r.l.

Via Liberazione, 71 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy - P.iva: 10373980969
T. +39 02 94750334 - M. info@enclaramedical.it - www.enclaramedical.it